

# Zimmer Biomet Dental

## Osteótomos cónicos

Os osteótomos cónicos encontram-se disponíveis em formato reto e angulado. Existem quatro tamanhos disponíveis para osteótomo cónico reto ou angulado. Os tamanhos correspondem aos diâmetros dos implantes cónicos da Zimmer Biomet Dental (diâmetros de 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 6,0 mm).

As marcações de profundidade estão gravadas na superfície da ponta com acabamento mate. Isto melhora a visibilidade das linhas de profundidade, torna-as permanentes e reduz a possibilidade de corrosão na ponta operacional.

### Formato angulado


Nota: o formato angulado tem um desvio de 30°



### Formato reto




### Extremidade contundente do osteótomo

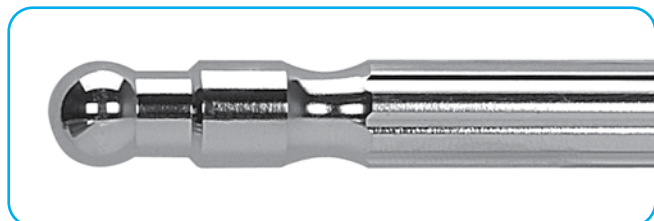

A bola na extremidade contundente do osteótomo tolera golpes com martelo em ângulos incorretos, fornecendo força num vetor linear até à extremidade operacional.

### Extremidade operacional do osteótomo

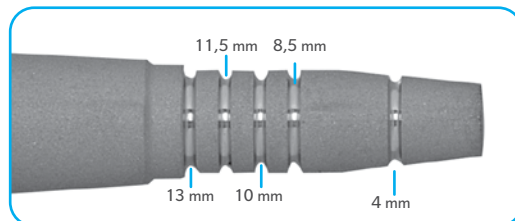

As linhas de profundidade encontram-se alinhadas para indicar a colocação cristal dos implantes cónicos Certain e de hexágono externo.

## Osteótomos retos e angulados

Descrição	N.º do item
Cónico reto de 3,25 mm	NTOST3
Cónico reto de 4,0 mm	NTOST4
Cónico reto de 5,0 mm	NTOST5
Cónico reto de 6,0 mm	NTOST6
Cónico angulado de 3,25 mm	NTOST3A
Cónico angulado de 4,0 mm	NTOST4A
Cónico angulado de 5,0 mm	NTOST5A
Cónico angulado de 6,0 mm	NTOST6A
Kit cónico reto (inclui os quatro tamanhos e a caixa de esterilização)	NTOST0
Kit cónico angulado (inclui os quatro tamanhos e a caixa de esterilização)	NTOST0A



Ao utilizar osteótomos cónicos, devem ser seguidos os procedimentos de osteótomo padrão.

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dentária da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a médicos e não constitui uma recomendação ou um parecer médico. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento por escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB1087PT REV A 04/20 ©2020 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

