

Abgewinkelte konische Abutments

Entdecken Sie einen neuen Winkel nach Wahl.



Wählen Sie das richtige Implantationsprotokoll

Mit unseren Zimmer Biomet Dental abgewinkelten konischen Abutments erhalten Sie die Flexibilität, das richtige Implantatprotokoll für Ihren Patienten zu wählen.

Das Wichtigste für Patienten, die ein Implantat benötigen ist, die richtige Lösung für eine optimale Versorgung zu haben.



Mit der Einführung des Zimmer Biomet Dental abgewinkelten konischen Abutments hat sich unser Portfolio von Abutments für verschraubte Restaurationen beträchtlich erweitert. Sie haben nun eine größere Auswahl beim Protokoll, den verfügbaren Produkten sowie bestimmten Abstufungen, Winkeln und Kragenhöhen.



Mit den RevitaliZe™ Patientlösungen können Sie jetzt Ihre bewährten Produkte auf der Basis der individuellen klinischen Situation Ihres Patienten im Rahmen des chirurgischen und restaurativen Protokolls anwenden. Wir bieten Ihnen einmal mehr neue Auswahlmöglichkeiten — damit Sie sich auch künftig für Zimmer Biomet Dental entscheiden.

Bringen Sie mit den RevitaliZe Patientenlösungen Schwung in Ihre Praxis

Die gesamte Zimmer Biomet Dental Abutmentfamilie ist ein vollständiges Portfolio von Produkten, die sich mit mehreren Protokollen einsetzen lassen. Unsere abgewinkelten konischen Abutments repräsentieren das traditionelle Abutmentprofil für verschraubte und mehrgliedrige Restaurationen bei teil- oder unbezahnten Patienten.

- Die konische Plattform mit Schraubenfassung geht durch das Weichgewebe hindurch und erleichtert somit einfache Verfahren auf Abutmentniveau und Restaurationen für verschraubten Zahnersatz sowie Steg-Deckprothesen
- Der Aufbau mit niedrigem 1,2 mm-Profil und 15° konischen Wänden sorgt für problemloses Einsetzen des Gerüsts und Erreichen eines passiven Sitzes




Mit den neuen Zimmer Biomet Dental abgewinkelten konischen Abutments haben Sie die Möglichkeit, chirurgische Protokolle zu verwenden, bei denen Implantate divergierend gesetzt werden. Somit können Sie den verfügbaren Knochen maximal nutzen, den Alveolarnerv und die Kieferhöhle meiden und die Freundsättel beim Zahnersatz minimieren.

Für RevitaliZe Patientenlösungen werden mehrere Tapered Screw-Vent® Implantate in beiden Zahnbögen verwendet. Diese können sofort belastet und provisorisch versorgt oder mittels herkömmlicher zweizeitiger Protokolle zu einem späteren Zeitpunkt restauriert werden. Mit Gold-, Kunststoff-, Titan- und Stegkäppchen für die konische Abutmentfamilie haben Sie nun mehr Wahlmöglichkeiten für die endgültige Restauration als jemals zuvor.

Abgewinkelte konische Abutments

Entdecken Sie das neue Zimmer Biomet Dental abgewinkelte, konische Abutment.

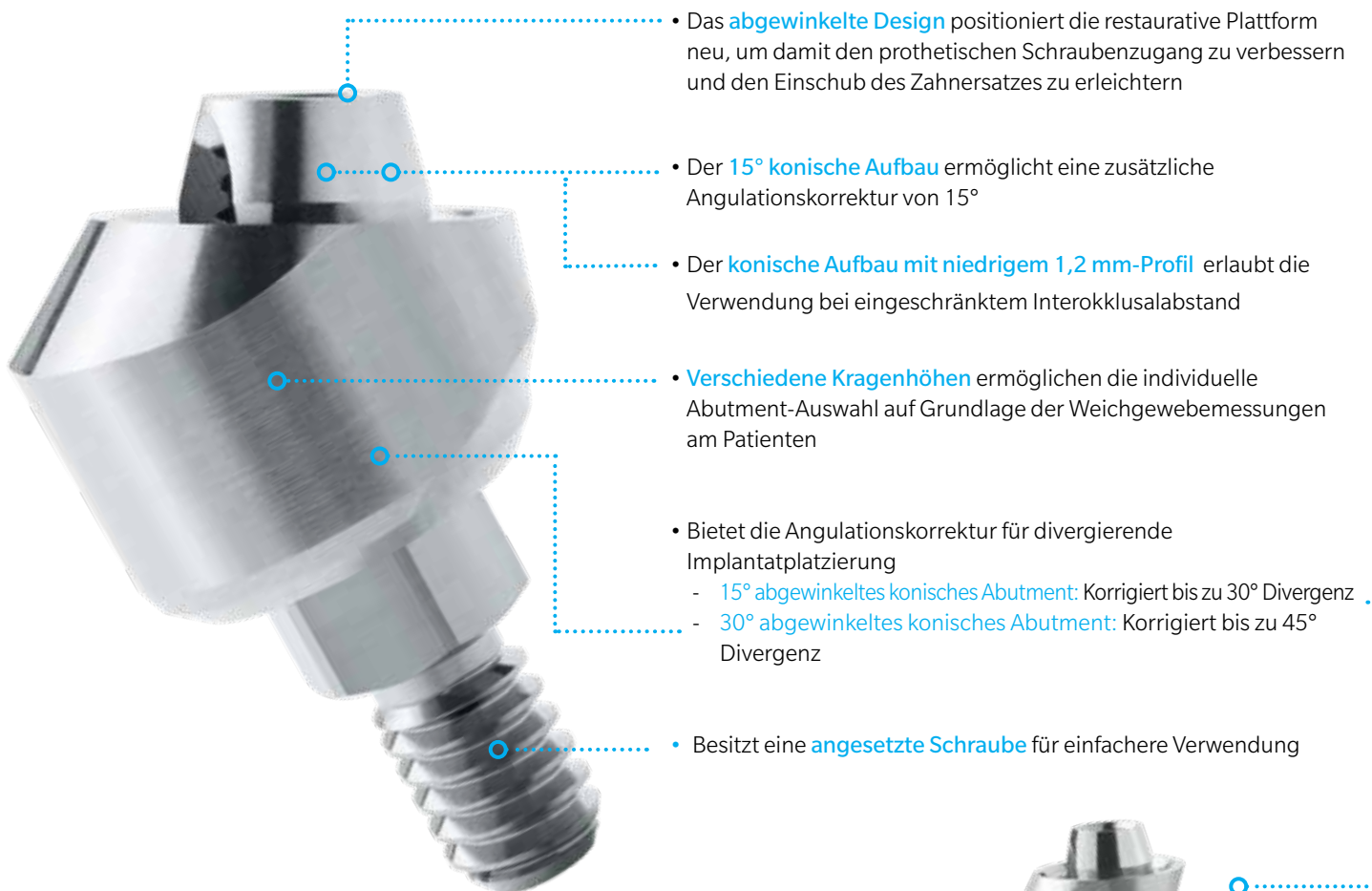

- Das **abgewinkelte Design** positioniert die restaurative Plattform neu, um damit den prothetischen Schraubenzugang zu verbessern und den Einschub des Zahnersatzes zu erleichtern
- Der **15° konische Aufbau** ermöglicht eine zusätzliche Angulationskorrektur von 15°
- Der **konische Aufbau mit niedrigem 1,2 mm-Profil** erlaubt die Verwendung bei eingeschränktem Interokklusalabstand
- **Verschiedene Kragehöhen** ermöglichen die individuelle Abutment-Auswahl auf Grundlage der Weichgewebemessungen am Patienten
- Bietet die Angulationskorrektur für divergierende Implantatplatzierung
 - **15° abgewinkeltes konisches Abutment**: Korrigiert bis zu 30° Divergenz
 - **30° abgewinkeltes konisches Abutment**: Korrigiert bis zu 45° Divergenz
- Besitzt eine **angesetzte Schraube** für einfachere Verwendung



- Das **Abutment-Einbringinstrument** ist bereits vormontiert und dient dem einfacheren Einbringen und Positionieren des Abutments





Die Zimmer Biomet abgewinkelten konischen Abutments besitzen die gleiche restaurative Plattform wie konische Abutments, so dass keine neuen restaurativen Techniken erlernt werden müssen. Die restaurativen Komponenten sind austauschbar – damit sind dank der gängigen restaurativen Plattform mit 4,5 mm Bestandsüberprüfungen und Lagerbedarf in Ihrer Praxis auf ein Mindestmaß beschränkt.




STARK UND HALTBAR

Zimmer 30° abgewinkelte konische Abutments sind in Ermüdungstests um 25 % stabiler als 30° Multi-Unit-Abutments von Wettbewerbern¹ und um über 80 % stabiler in Kompressionstests

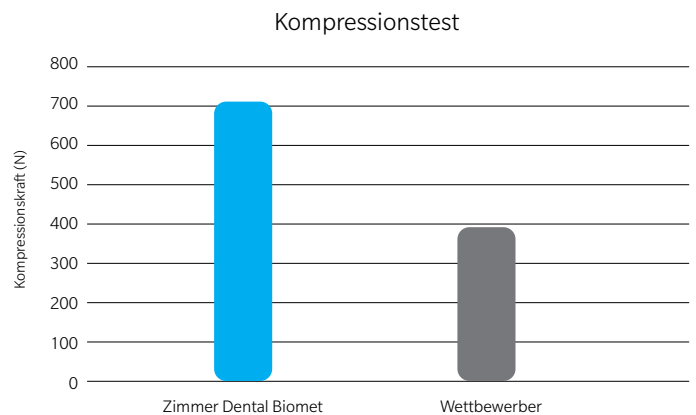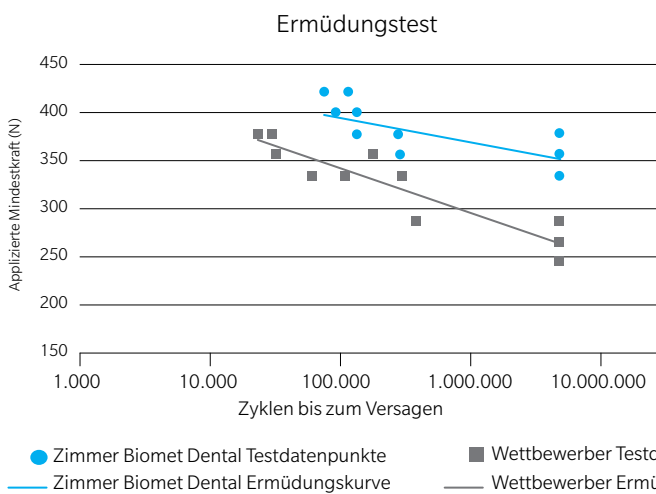

Die Zimmer Biomet Dental Schrauben für Suprakonstruktionen halten einen größeren Prozentsatz des Drehmoments zurück als die Schrauben für Suprakonstruktionen der Mitbewerber²

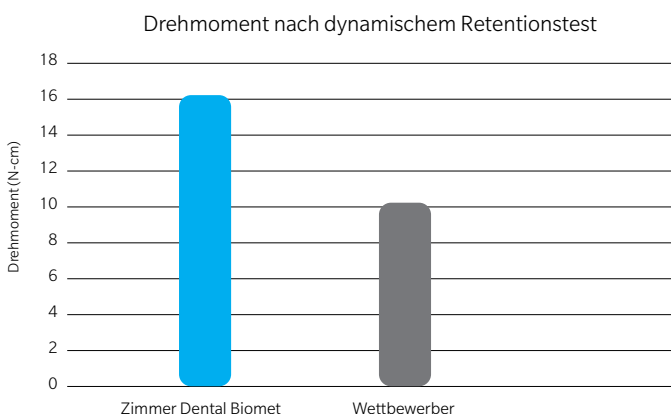

¹ Festigkeits- und Ermüdungstests durchgeführt gemäß ISO-Norm 14801. Daten in Akten.

² Maggay A. Angled Tapered Abutments, restorative solutions for tilted implant protocols. Daten in Akten.

Bestellinformationen

Konische Abutments, einteilig

Konische Abutments werden für mehrgliedrige, verschraubte Restaurationen verwendet. Die Abutments greifen nicht in die Innensechskant-Verbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen. Einschließlich Gingivaformer (TATHC).




Implantat-plattform	Kragenhöhe				
	0,75 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
3,5 mmD	TAC1	TAC2	TAC3	TAC4	TAC5
4,5 mmD	TACW1	TACW2	TACW3	TACW4	TACW5
5,7 mmD	TA5C1	TA5C2	TA5C3	TA5C4	-

Abgewinkelte konische Abutments, 15°

Abgewinkelte konische Abutments werden für mehrgliedrige, verschraubte Restaurationen verwendet. Die Abutment-Halteschraube ist im Abutment vormontiert. Mit jedem Abutment wird ein Abutment-Einbringinstrument geliefert.



Implantat-plattform	Kragenhöhe		
	1,0 mm/2,0 mm (a/b)	2,0 mm/3,0 mm (a/b)	3,0 mm/4,0 mm (a/b)
3,5 mmD	15AT312	15AT323	15AT334
4,5 mmD	15AT412	15AT423	15AT434

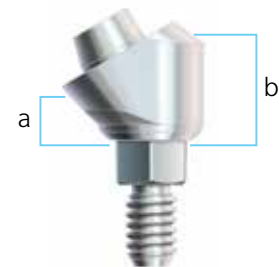

Abmessungen Kragenhöhe

Abgewinkelte konische Abutments, 30°

Abgewinkelte konische Abutments werden für mehrgliedrige, verschraubte Restaurationen verwendet. Die Abutment-Halteschraube ist im Abutment vormontiert. Mit jedem Abutment wird ein Abutment-Einbringinstrument geliefert.



Implantat-plattform	Kragenhöhe		
	2,0 mm/4,0 mm (a/b)	3,0 mm/5,0 mm (a/b)	4,0 mm/6,0 mm (a/b)
3,5 mmD	30AT324	30AT335	30AT346
4,5 mmD	30AT424	30AT435	30AT446

Gingivaformer für konisches Abutment

Der Gingivaformer wird auf das konische und abgewinkelte konische Abutment geschraubt.



Beschreibung	Artikelnummer
Titan-Gingivaformer für konisches Abutment	TATHC

Transferkomponenten für konisches Abutment

Die Transferkappen werden zur Abformung auf das konische und abgewinkelte konische Abutment geschraubt. Dieses Verfahren überträgt die Position des konischen und abgewinkelten konischen Abutments.



Beschreibung	Artikelnummer
Direkter Abdruckpfosten konisches Abutment (offener Löffel) inklusive Abdruckpfostenschraube (SCDTS)	ACTDT
Indirekter Abdruckpfosten konisches Abutment (geschlossener Löffel)	ACTIT
Konisches Abutmentanalog	ACTR

Käppchen, Hülsen und Stegsysteme für konisches Abutment

Die unten aufgeführten Käppchen passen auf die konischen und abgewinkelten konischen Abutments und werden mit einer Kappenschraube fixiert.



Beschreibung	Höhe/Länge	Artikelnummer
Titan-Provisorienkäppchen inklusive Schraube (SCTS)	9,5 mm	ACTT
Goldkappe für konisches Abutment inklusive Schraube (SCTS)	-	ACTGC
Ausbrennbares Kunststoffkäppchen inklusive Schraube (SCTS)	5 mm	ACTP
Steg-Goldkappe inklusive Schraube (SCTS)	3 mm	TGC3
Steg-Goldkappe, lang inklusive Schraube (SCTS)	5 mm	TGC5
Titan-Stegkappe inklusive Schraube (SCTS)	5 mm	TTC5
Ersatzschraube für Kappen	-	SCTS
Aufwachsschraube für konisches Abutment	12 mm	SCWS

Wählen Sie hohe Qualität. Wählen Sie große Auswahl. Wählen Sie Zimmer Biomet Dental.

Die RevitaliZe Patientenzösungen und die Zimmer Biomet Dental abgewinkelten konischen Abutments stehen für unser kontinuierliches Bestreben, Ihnen das breiteste Sortiment qualitativ hochwertiger Produkte zu liefern – damit Sie auch künftig Ihren Patienten die bestmögliche Behandlung bieten können.



Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen Sie www.zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüezfeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt.

Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet Dental kopiert oder nachgedruckt werden.
ZB0039DE REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

