

Pilar de perfil curto

Para hexágono externo e Certain®




Restaurações estéticas para espaço interarcadas limitado

A altura é importante

O pilar de perfil curto para restaurações aparafusadas excelentes.


Existe um longo historial de documentação sobre restaurações aparafusadas em implantologia dentária. Estes pilares proporcionam um acesso mais claro e a possibilidade de recuperação de restaurações de implantes de uma ou várias unidades. Além disso, podem existir pacientes com determinadas situações onde os benefícios das restaurações aparafusadas são necessários, tais como a reconstrução total da boca e as técnicas de carga imediata. A Zimmer Biomet Dental oferece pilares de perfil curto e componentes de restauração para fins estéticos e de facilidade de utilização. Com uma altura de 2,2 mm, o pilar de perfil curto apresenta um dos perfis de restauração mais curtos no mercado atual. Isto permite a realização de restaurações estéticas funcionais em espaços interarcadas limitados de 7,5 mm, mesmo quando é necessária uma correção de ângulo.

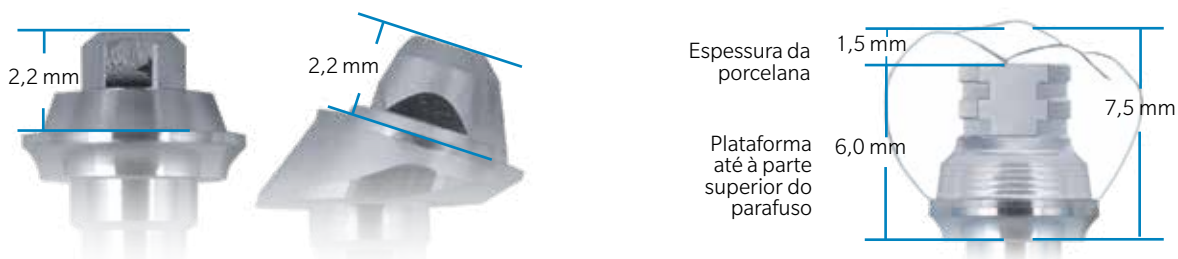

Colocação fácil

Facilidade de utilização com perfis de emergência contornados.

O novo perfil de emergência contornado do pilar de perfil curto proporciona uma colocação mais fácil em cirurgia sem retalho e com posicionamento subcrestal. O perfil de emergência começa em linha reta e, em seguida, forma uma curva ligeira para fora até à plataforma de restauração. Esta emergência atenua a necessidade de criação de perfis ósseos antes de assentar os pilares. Como o pilar de perfil curto tem uma plataforma de restauração, não é necessário proceder ao inventário de vários tamanhos de componentes de restauração. Quer esteja a restaurar um implante de plataforma de 3,4 mm ou de 5,0 mm, os componentes de restauração têm o mesmo diâmetro de assento de 4,8 mm.

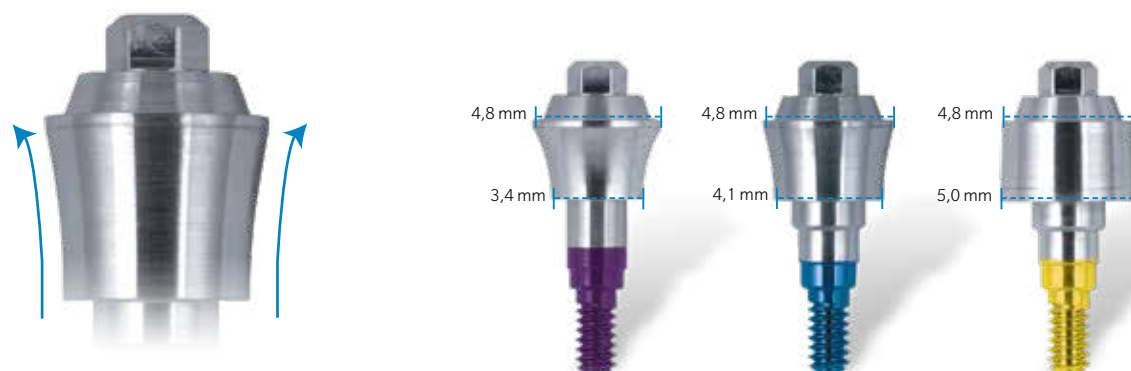

Perfil de emergência contornado

Uma plataforma de restauração

Transferência fácil

Os designs de uma e duas peças do pilar de perfil curto têm uma ferramenta de transferência descartável para facilitar a utilização e permitir a colocação esterilizada a partir da embalagem no paciente.



Múltiplas opções de restauração

O pilar de perfil curto oferece uma vasta gama de opções de restauração versáteis. Existem várias opções de restauração provisória para procedimentos de carga imediata ou recuperação a longo prazo, incluindo os componentes provisórios QuickBridge®, cilindros de titânio com revestimento de nitreto de titânio (TiN) dourado e cilindros temporários PreFormance® (PEEK). As opções para a restauração definitiva vão desde cilindros moldáveis dourados a barras BellaTek. Estas opções foram todas concebidas com o objetivo de proporcionar força de restauração e resultados estéticos.



Estruturas e barras BellaTek®



Componentes provisórios QuickBridge de perfil curto




Cilindros temporários de titânio e PreFormance de perfil curto

Com a sua altura baixa, perfil de emergência contornado e várias opções de restauração, a oferta de produtos de componentes de restauração e de pilares de perfil curto pode ser uma opção ideal para o seu próximo caso de restaurações aparafusadas.

Informações para encomendas



Pilares de perfil curto

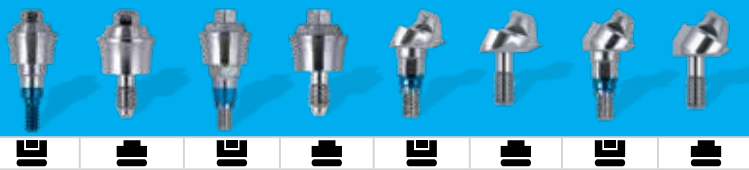

3,4 mm	Superfície de assento							
Altura do colo	Uma peça (não hexagonal)		Duas peças (hexagonal)		17° (hexagonal)		30° (hexagonal)	
1,0 mm	ILPC341U	LPC341U	ILPC341	LPC341	-	-	-	-
2,0 mm	ILPC342U	LPC342U	ILPC342	LPC342	ILPAC3217	LPAC3217	-	-
3,0 mm	ILPC343U	LPC343U	ILPC343	LPC343	-	-	ILPAC3330	LPAC3330
4,0 mm	ILPC344U	LPC344U	ILPC344	LPC344	ILPAC3417	LPAC3417	-	-
5,0 mm	-	-	-	-	-	-	ILPAC3530	LPAC3530

4,1 mm	Superfície de assento							
Altura do colo	Uma peça (não hexagonal)		Duas peças (hexagonal)		17° (hexagonal)		30° (hexagonal)	
1,0 mm	ILPC441U	LPC441U	ILPC441	LPC441	-	-	-	-
2,0 mm	ILPC442U	LPC442U	ILPC442	LPC442	ILPAC4217	LPAC4217	-	-
3,0 mm	ILPC443U	LPC443U	ILPC443	LPC443	-	-	ILPAC4330	LPAC4330
4,0 mm	ILPC444U	LPC444U	ILPC444	LPC444	ILPAC4417	LPAC4417	-	-
5,0 mm	-	-	-	-	-	-	ILPAC4530	LPAC4530

5,0 mm	Superfície de assento							
Altura do colo	Uma peça (não hexagonal)		Duas peças (hexagonal)		17° (hexagonal)		30° (hexagonal)	
1,0 mm	ILPC541U	LPC541U	ILPC541	LPC541	-	-	-	-
2,0 mm	ILPC542U	LPC542U	ILPC542	LPC542	ILPAC5217	LPAC5217	-	-
3,0 mm	ILPC543U	LPC543U	ILPC543	LPC543	-	-	ILPAC5330	LPAC5330
4,0 mm	ILPC544U	LPC544U	ILPC544	LPC544	ILPAC5417	LPAC5417	-	-
5,0 mm	-	-	-	-	-	-	ILPAC5530	LPAC5530

= Conexão interna Certain® = Conexão hexagonal externa

Compatibilidade do pilar

Componente	Pilar hexagonal	Pilar não hexagonal
Hexagonal	Sim	Não
Não hexagonal	Sim	Sim

Parafusos de perfil curto

Descrição	Item n.º
Parafuso de retenção Gold-Tite®	LPCGSH
Parafuso de retenção em titânio	LPCTSH
Parafuso para waxing	LPCWS

Ferramentas laboratoriais para perfil curto

Descrição	Item n.º
Ferramenta de polimento	LPCAMI
Proteção de polimento	LPCPP

Perfiladores ósseos para pilar de perfil curto

Descrição	Item n.º
Perfilador ósseo para pilar de perfil curto, 3,4 mm (D)	LPCBP3
Perfilador ósseo para pilar de perfil curto, 4,1 mm (D)	LPCBP4
Perfilador ósseo para pilar de perfil curto, 5,0 mm (D)	LPCBP5

Coifas de moldagem para perfil curto e análogo

Descrição	Item n.º
Coifa de moldagem pick-up (hexagonal)	LPCCIC1
Coifa de moldagem pick-up (não hexagonal)	LPCCIC2
Coifa de moldagem Twist Lock™ (hexagonal)	LPCTIC1
Twist Lock (não hexagonal)	LPCTIC2
Coifa de moldagem QuickBridge®	LPCRIC
Análogo de laboratório	LPCLA

Componentes de restauração provisória de perfil curto

Descrição	Item n.º
Cilindro temporário (hexagonal)	LPCTC1
Cilindro temporário (não hexagonal)	LPCTC2
Tampa de cicatrização	LPCHC
Cilindro temporário PreFormance® (hexagonal)	LPCPTC1
Cilindro temporário PreFormance (não hexagonal)	LPCPTC2
QuickBridge	LPCQB
Tampa de substituição QuickBridge	LPCQBCAP
Extensão distal	LPCDE


Componentes de restauração final de perfil curto

Descrição	Item n.º
Cilindro dourado (hexagonal)	LPCGC1
Cilindro dourado (não hexagonal)	LPCGC2
Cilindro moldável (hexagonal)	LPCCC1
Cilindro moldável (não hexagonal)	LPCCC2
Cilindro soldado a laser	LPCTUCA

Chave hexagonal grande e ponta de chave

Descrição	Item n.º
Chave hexagonal grande	PHD02N, PHD03N*
Ponta de chave hexagonal grande	RASH3N, RASH8N*
Chave para pilar posterior, 17 mm (C)	PAD00
Chave para pilar padrão, 24 mm (C)	PAD24

* Mais estreita para compatibilidade com pilares de perfil curto angulados com hexágono externo. É possível identificar a chave e as pontas de chave através de um ponto marcado a laser a seguir ao número do item, conforme apresentado na imagem abaixo.

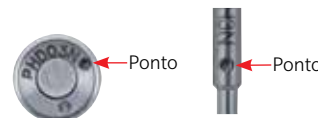

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite o site zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Alameda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: + 34-93-470-59-50
Fax: +34 93-372-11-25
Atención al cliente: 800 827 836

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui um parecer ou recomendação médicos. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0044PT REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

