

Zimmer Biomet Dental

Osteótomos cónicos

Los osteótomos cónicos están disponibles en diseños rectos y angulados. Hay disponibles cuatro tamaños de osteótomos cónicos rectos y cuatro angulados. Los tamaños se corresponden con los diámetros de los implantes cónicos de Zimmer Biomet Dental (diámetros de 3,25 mm, 4,0 mm, 5,0 mm y 6,0 mm).


Las marcas de profundidad están grabadas a máquina en la superficie de la punta con acabado mate. De esta manera, se mejora la visibilidad de la línea de profundidad, se consigue que la línea de profundidad sea permanente y se reduce la posibilidad de corrosión en la punta quirúrgica.

Diseño angulado

Nota: El diseño angulado tiene un desplazamiento de 30°.



Diseño recto

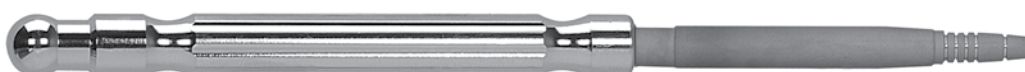


Punta de impactación del osteótomo



La esfera de la punta de impactación del osteótomo tolera los golpes de martillo en ángulo, lo que impulsa la fuerza en un vector lineal hacia la punta quirúrgica.

Punta quirúrgica del osteótomo

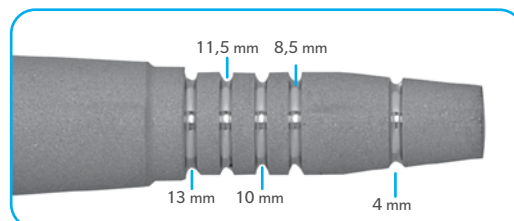

Las marcas de profundidad están alineadas para indicar la colocación de la cresta de los implantes cónicos Certain y Ex Hex.

Osteótomos rectos y angulados

Descripción	Referencia
Cónico recto de 3,25 mm	NTOST3
Cónico recto de 4,0 mm	NTOST4
Cónico recto de 5,0 mm	NTOST5
Cónico recto de 6,0 mm	NTOST6
Cónico angulado de 3,25 mm	NTOST3A
Cónico angulado de 4,0 mm	NTOST4A
Cónico angulado de 5,0 mm	NTOST5A
Cónico angulado de 6,0 mm	NTOST6A
Kit cónico recto (incluye los cuatro tamaños y la bandeja de esterilización)	NTOST0
Kit cónico angulado (incluye los cuatro tamaños y la bandeja de esterilización)	NTOST0A



Se deben seguir los procedimientos de osteótomo convencional cuando se utilicen los osteótomos cónicos.

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet y todos los productos están fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comerciales autorizados. Si desea más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB1087ES REV A 04/20 ©2020 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

