

Zimmer Biomet Dental Ostéotomes coniques

Les ostéotomes coniques sont disponibles en version droite ou coudée. Quatre tailles d'ostéotomes coniques droits et quatre tailles d'ostéotomes coniques coudés sont disponibles. Les tailles correspondent aux diamètres des implants coniques de Zimmer Biomet Dental (diamètres de 3,25 mm, 4,0 mm, 5,0 mm et 6,0 mm).

Les repères de profondeur sont gravés à la machine sur la surface de la pointe aux finitions mates. Cela permet d'améliorer la visibilité de la ligne de profondeur, de la rendre permanente et de réduire le risque de corrosion sur l'extrémité utile.

Version coudée


Remarque : la version coudée se caractérise par un décalage de 30°



Version droite




Extrémité recevant les chocs de l'ostéotome

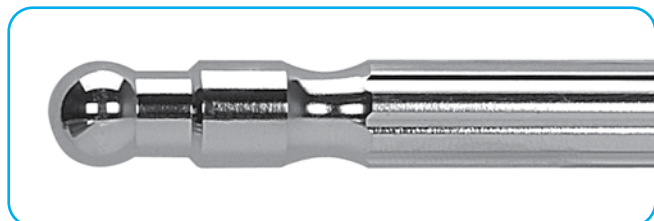

La bille située sur l'extrémité recevant les chocs de l'ostéotome est résistante aux coups de maillet hors angle, exerçant une force selon un vecteur linéaire à l'extrémité utile.

Extrémité utile de l'ostéotome

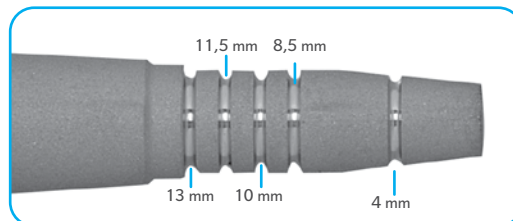

Les lignes de profondeur sont alignées pour indiquer la pose crestale des implants coniques Certain et à hexagone externe.

Ostéotomes droits et coudés

Description	Référence
Ostéotome droit conique, 3,25 mm	NTOST3
Ostéotome droit conique, 4,0 mm	NTOST4
Ostéotome droit conique, 5,0 mm	NTOST5
Ostéotome droit conique, 6,0 mm	NTOST6
Ostéotome coudé conique, 3,25 mm	NTOST3A
Ostéotome coudé conique, 4,0 mm	NTOST4A
Ostéotome coudé conique, 5,0 mm	NTOST5A
Ostéotome coudé conique, 6,0 mm	NTOST6A
Kit d'ostéotomes droits coniques (comprend les quatre tailles d'ostéotomes et un coffret de stérilisation)	NTOST0
Kit d'ostéotomes coudés coniques (comprend les quatre tailles d'ostéotomes et un coffret de stérilisation)	NTOST0A



Les procédures standard d'utilisation des ostéotomes doivent être suivies lors de l'utilisation des ostéotomes coniques.

